

Panasonic
Beauty

NEW

RF × Ultrasonic
RF 超聲波緊緻器
EH-XR10



RF 超聲波緊緻器 (EH-XR10)

▶ 切勿在下列醫療設備或家用醫療儀器附近使用本產品：

- 植入體內的醫療儀器，如心臟起搏器等
- 生命維持器
- 連接式醫療儀器，如心電量度計或靜脈注射器等

▶ 以下人士切勿使用本產品：

- 孕婦
- 擁有過敏性體質及敏感肌膚的人士
- 患有皮膚病或異位性皮膚炎等疾病的人士
- 心臟病患者
- 臉部神經失調或有觸覺障礙的人士
- 糖尿病患者
- 出血性疾病、血友病患者
- 高血壓患者
- 正在進行牙科治療的人士
- 曾經罹患視網膜剝離的人士
- 高度近視人士 (-6D 以上)
- 在臉上植入金屬、矽膠或塑膠植體的人士
- 幼兒及成長期兒童
- 因交通事故而產生頭部及眼部後遺症的人士
- 曾接受眼部手術的人士
- (曾接受 LASIK 雷射近視手術的人士請向主治醫師諮詢)
- 感熱遲鈍及皮膚不具感知能力的人士

此產品目錄以環保紙及墨印刷



本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，
以廠方生產的規格為準。

本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。

11/2018
Panasonic Beauty Hong Kong
www.panasonic.hk

信興集團 信興電器貿易有限公司

緊緻我的 面部輪廓

Premium Edition
Made in Japan



“咦!?”

有沒有出現以下情況？

- ☐ 嘴角及面頰有點下垂
- ☐ 笑過後，眼尾及嘴部等出現粉底痕跡
- ☐ 覺得面部輪廓不如以往分明
- ☐ 不經意在玻璃窗看到自己的倒影時不禁嚇一跳

這些可能是衰老的跡象…

緊緻提拉， 打造迷人的面部輪廓

歲月痕跡，難以避免…

不再為皮膚變化而煩惱，

不再採取放棄的態度。

皮膚緊緻提拉技術，RF超聲波緊緻器

讓皮膚每天充滿彈性，

在家中進行真正的

抗衰老護理※1



※1 根據適合年齡的皮膚護理 ● 效果因人而異

集中護理容易顯露 年齡的位置

嘴部



面頰



下顎



眼部*



前額

只適用於RF(射頻)
模式




面紋



使用一次即可感受效果

【試驗方法】一次
RF(射頻)溫度強度：MED(中)
潔面後塗上面部緊緻啫喱，只在半邊臉使用
5分鐘，沖洗啫喱後的皮膚狀態評估
【測試對象】30~40多歲的女性11名
○經本公司測試，效果因人而異

效果感受評估 (7：有 ⇔ 1：無)

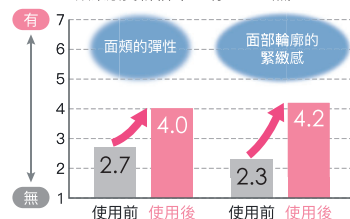

* 不適用於眼皮及眼球 (插圖只作參考)

RF × 超聲波

(射頻)

在美容院大受歡迎的RF(射頻)及超聲波技術交替輸出。
雙重提拉技術，為皮膚帶來前所未有的彈性※1

4 點集中 RF

配置4處RF(射頻)放射點，
集中提升RF(射頻)能量

略帶溫熱，舒適地為有皮膚煩惱
的部分作緊緻護理

RF是什麼？

Radio Frequency的簡稱，稱為「射頻」的高頻能量，激活膠原蛋白再生，緊緻面部輪廓，此技術於美容院很受歡迎


1 MHz 超聲波

1 秒間以約100萬次的
細微震動按摩皮膚

超聲波是什麼？

高於20,000 Hz，是人耳無法聽見的細微震動聲音，帶動水份至皮膚表層，為面頰及面部輪廓的皮膚帶來彈性。與RF一樣，是在美容院十分普及

RF (射頻) 與超聲波每秒交替輸出

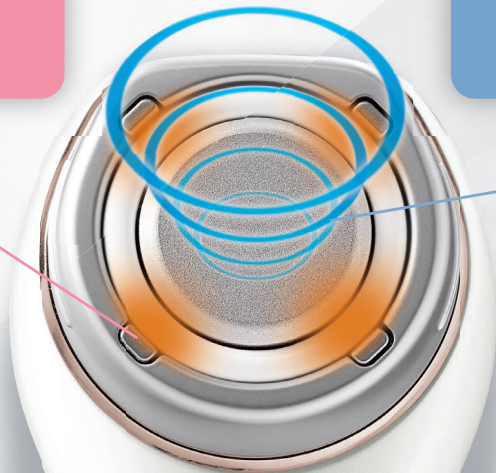

※1 與本公司2015年推出之EH-XU10比較
● 效果因人而異 (照片只作參考)

緊貼輪廓設計

RF(射頻)與超聲波有效傳達到皮膚，即使在容易顯露衰老跡象的嘴部及面部輪廓也可緊密貼服，更有效做緊緻護理，達致集中護理的效果



徹底緊貼皮膚，
增加提升*效果

頂部平滑形狀

機頭上方設計平滑，易於在皮膚直線移動


緊貼可活動部分

超聲波頭可上下按壓，緊貼皮膚凹凸位及面部輪廓



※ 提升…指向上提拉的动作 ● 效果因人而異 (照片只作参考)

卸妝及潔面
完成後，
準備OK!

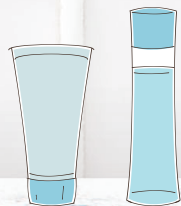


1. 開啟電源，選擇模式，然後選擇RF（射頻）溫感強度（開始預熱）



閃爍後，當指示燈持續亮起時，代表預熱完成(約1分鐘後)

2. 在預熱期間塗上面部緊緻啫喱或日常護膚品

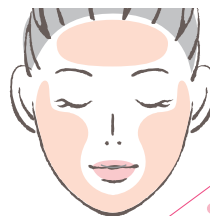

在護理部位
( 部位)塗上
啫喱或護膚品



(使用啫喱時約1粒
夏威夷果仁大小)
(約2~3 g)

● 為使RF(射頻)及超聲波傳達到皮膚，
請務必使用啫喱或護膚品



本產品不可用於眼皮、眼球、耳朵、嘴唇及頸部，
前額只可使用RF(射頻)模式

使用日常護膚品時

請使用容易推開的護膚品

含有大量油份的護膚品會妨礙RF(射頻)和超聲波能量的發射



● 啫喱 · 精華液 · 較水狀的乳液



× 乳霜 · 爽膚水 · 乳液 · 精油




3. 把機頭貼著皮膚移動

如使用中途有摩擦不適的感覺，請添加一點面部緊緻啫喱或護膚品，以免對皮膚產生不良反應

RF(射頻)及超聲波模式

約8分鐘

面部輪廓 ↔ 嘴部～眼部

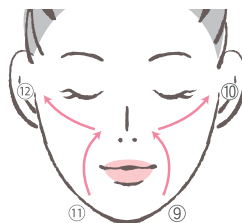

「啾啾」
提示聲


重覆 1 ~ 12

把面頰從下向上提拉
箭嘴所示的每個動作約5秒鐘



約2分鐘

嘴部

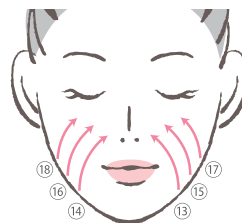


重覆 13 ~ 18

沿著面紋，把嘴邊皮膚從下
往上提拉
箭嘴所示的每個動作約5秒鐘

RF(射頻)模式

約2分鐘

前額

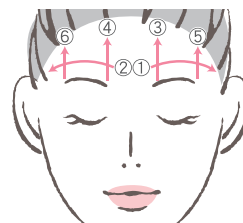

重覆 1 ~ 6

從前額中間向太陽穴移動，
然後從眉毛上方向上移動
箭嘴所示的每個動作約5秒鐘

● 效果因人而異 (照片及插圖只作參考)

4. 自動關上電源

12分鐘的護理

使用紙巾等抹去殘留在機頭的啫喱或護膚品

本產品不可用水清洗



不可用水清洗

使用面部緊緻啫喱時

護理完成後，請用水沖洗啫喱，然後以日常所用的護膚品進行護理



單獨出售 面部緊緻啫喱



面部緊緻啫喱
EH-4R01 (200g)

用量參考：
每週使用3次，可使用
約3~4個月

Q & A

Q 可以每天使用嗎？

A 1天1次使用12分鐘，
每次須隔最少1天，
每週最多使用3次，
請勿過度使用本產品

Q 可以用在雙手或身體嗎？

A 本產品專為面部而設，
只適用於面部美容

Q 使用本產品後，
我該用怎樣的
護膚品？

A 請根據護理後的皮膚狀態，
使用日常所用的護膚品

● 效果因人而異